


Número da Peça:
Part number: RN179 (ver tabela abaixo)

Descrição da Peça:
Part description: Tampa luer lock macho

Data:
Date: 09/05/2018

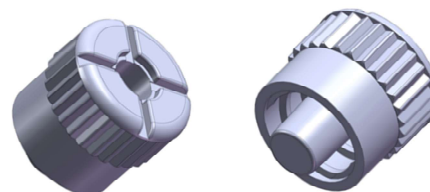

Essa especificação descreve as propriedades do produto acima indicado.
This specification describes the properties of the above product.

Especificações (Specifications)

Material:
Material:

Material da peça:

Raw material:

Código Artigo	Descrição
RN179ABRA0000B00	Tampa Luer lock macho PP branca
RN179ABRA0000C00	Tampa Luer lock macho PP vermelha
RN179ABRA0000D00	Tampa Luer lock macho PP azul
RN179ABRA0000E00	Tampa luer lock macho PP verde
RN179AMAC0000B00	Tampa Luer lock macho ABS branca
RN179ATER0000A0	Tampa Luer lock macho ABS transparente
Part number	Description
RN179ABRA0000B00	Male Luer lock cover PP white
RN179ABRA0000C00	Male Luer lock cover PP red
RN179ABRA0000D00	Male Luer lock cover PP blue
RN179ABRA0000E00	Male Luer lock cover PP green
RN179AMAC0000B00	Male Luer lock cover ABS white
RN179ATER0000A0	Male Luer lock cover ABS clear

Características do produto:
Product characteristics:

Dimensões aproximadas: Comprimento – 11,20 mm x diâmetro – 10,25mm;
Approximated dimensions: Height – 11,20 mm x diameter – 10,25mm;

Cores: Branco / Vermelho / Azul / Verde / Transparente;
Color: White / Blue / Red / Verde / Clear;

Norma de Referência: ISO 594-1/2;
Reference standard: ISO 594-1/2;

Método de montagem: Conexões;
Assembly Method: Connectors;

Temperatura máxima de armazenamento: 50°C;
Maximum storage temperature: 50°C (122°F);

Aplicação: Diversos (Tampa para luer fêmea);
Application: Multipurpose (Cap for female luer lock);

Esterilização:
Sterilization:

Pode ser esterilizada com EtO ou raios gama
Could to be sterilized with Ethylene oxide or gamma ray

Tipos de defeitos e nível de aceitação (NQA): Types of defects and acceptance level (AQL):	Conforme “Níveis de Inspeção Geral” - Norma ISO 2859 part. 1 – Tabela I – “Código de Letras para Tamanho de Amostras” – Classe II e Tabela II-A – “Plano de Amostra Individual para Inspeção Normal (Tabela mestre)”. <i>Regarding “General Inspection Levels” – Standard ISO 2859-1 – Table I – “Sample Size Code Letters” – Class II and Table II-A - “Single sampling plans for normal inspection (Master table)”</i> Nível de Qualidade Aceitável: Nível II - NQA 0,65 para defeitos críticos, NQA 1,0 para não críticos e 4,0 para menores. <i>Quality Acceptance Levels: Level II - AQL 0,65 to critical defects and 1,0 for non-critical and 4,0 for lower.</i> Inspeção visual (inspeção à olho nu e fonte de iluminação entre 300-450mm por 5 segundos. <i>Visual inspection</i> (inspection with naked eye and lamp at a distance of 300-450 mm. for 5 seconds). Verificações (defeitos críticos): <i>Verification (critical defects):</i> 1. Ponto de injeção ressaltado > 0,4mm; <i>Injection point with salience > 0,4mm;</i> 2. Trincas ou rachaduras; <i>Cracks or fissures;</i> 3. Peças incompletas, falhadas; <i>Incomplete or failed part;</i> 4. Rebarba no diâmetro externo (> 0,4mm ; <i>Burrs at external diameter (> 0,4mm);</i> 5. Emenda fria; <i>Cold junction;</i> 6. Rebarbas interna maiores que 0,2mm; <i>Flashes at internal area higher than 0,2mm;</i> 7. Partículas soltas maiores que 1,0mm² ; <i>Lost particles grater than 1,0 mm² ;</i> 8. Peça queimada; <i>Burned part;</i> 9. Rosca deformada; <i>Deformed screw;</i> 10. Peça com furo; <i>Hole in the part;</i> Verificações (defeitos não críticos): <i>Verification (no critical items):</i> 11. Sujeira; <i>Dirty;</i> 12. Óleo / graxas; <i>Oil / grasse;</i> 13. Riscos; <i>Scratches;</i> 14. Pintas > 0,4 mm²; <i>Black point > 0,4 mm²;</i> Verificações (defeitos menores): <i>Verification (no critical itens):</i> 14. Diferença de tonalidade; <i>Color variation;</i>
Desenho: Drawing:	O desenho anexo é parte da especificação do material e não deve ser duplicado ou repassado a terceiros sem autorização da GVS. <i>The drawing attached is part of the material specification and must not be duplicated or made accessible to any other company without GVS consent.</i>

Rótulo e embalagem: Labeling and packaging:	10.000 peças em dois sacos de PE fechados separadamente. 10.000 parts in two PE bags. Each bag must be closed. A primeira etiqueta de código de barras é colada do lado externo do segundo saco plástico. The first barcode label is glued at the external side of second plastic bag. A segunda etiqueta de código de barras é colada do lado externo da caixa de papelão duas ondas Kraft (50 x 39 x 31 cm), que contém três pacotes de 10.000 peças (totalizando 30.000 peças por caixa). The second barcode label is glued at the external side of cartoon box double wave kraft (50 x 39 x 31 cm) that contains three bags with 10.000 parts each (total 30.000 parts per box). Cada caixa é identificada com as seguintes informações de rastreabilidade: The box is identified with the following traceability information • Código do produto; Product code; • Descrição do produto; Product description; • Número do lote; Lot number; • Quantidade. Quantity. Diferentes lotes são identificados separadamente com suas respectivas etiquetas para prevenir misturas. Different lots are identified separately with each label to avoid mix-ups.
Certificações: Certification:	Sistema de Gerenciamento da Qualidade certificado nas Normas ISO 9001 e ISO TS 16949 The quality management system is compliance with Standards Norms ISO 9001 and ISO TS 16949

Revisão (Review):

Revisão 04 – 09/05/2018: Adequação ao novo formulário

Revisão 03 – 04/01/2018: Adequação ao novo formulário

Revisão 02 – 20/02/2017: Adicionado cota no detalhe interno do cone

Data de emissão (Date of issue): 09/05/2018

Revisão 01 – 22/10/2014: Inclusão de códigos

Revisão 00 – 01/10/2013: Inclusão da especificação

Emitido por: Alfredo R. Marins Jr.

Assinatura: 
GVS do Brasil Ltda.

☎ 55 (19) 3879-7209 (Direto)

☎ 55 (19) 3879-7251 (PABX)

✉ alfredo.marins@gvs.it

APROVAÇÃO DO CLIENTE (CUSTOMER APPROVAL)

Aceitamos esta especificação de material como parte do acordado de entrega
Accept this specification material as part of the delivery agreed

Número da Peça: RN179

Part number:

Descrição: Tampa luer lock macho

Description:

Nome: _____

Name:

Função: _____

Function:

Nome da organização: _____

Organization name:

Data: ____/____/____

Date:

Assinatura (signature): _____

ANEXO 1 - DESENHO

